

## FZ1SM

### Резьбовые адаптеры



FZ1SM 9

FZ1SM11

FZ1SM12

FZ1SM16

FZ1SM18

#### Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Внешняя резьба SM1.
- Совместимы с тубусами для линз серии **F1SM-A** с внутренней и внешней резьбой на обоих концах, **F1SM-B** с внутренней резьбой и **F1SM-C** с внешней резьбой.

#### Описание серии


Адаптеры с резьбой SM1 от компании OMTOOLS предназначены для монтажа оптики диаметром от 9 до 18 мм с держателями, имеющими резьбу SM1, а также с тубусами и другими элементами. Адаптеры оснащены внешней резьбой SM1 и центральным ограничительным отверстием, совместимым с ключом для стопорных колец.

Прецизионно обработанный сверхширокий паз обеспечивает стабильный двухточечный контакт с оптическими элементами с помощью двух винтов с резиновыми заглушками. Черное анодированное покрытие всего адаптера предназначено для минимизации воздействия на оптическую систему за счет снижения поверхностного отражения.


#### Отличающиеся параметры моделей

Модель	FZ1SM9	FZ1SM11	FZ1SM12	FZ1SM16	FZ1SM18
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6				
Обработка поверхности	Черное анодирование				
Внутренний размер, мм	∅ 9,0	∅ 11,0	∅ 12,0	∅ 16,0	∅ 18,0
Высота, мм	8,10	15,0	15,0	15,0	15,0


### Чертеж FZ1SM9

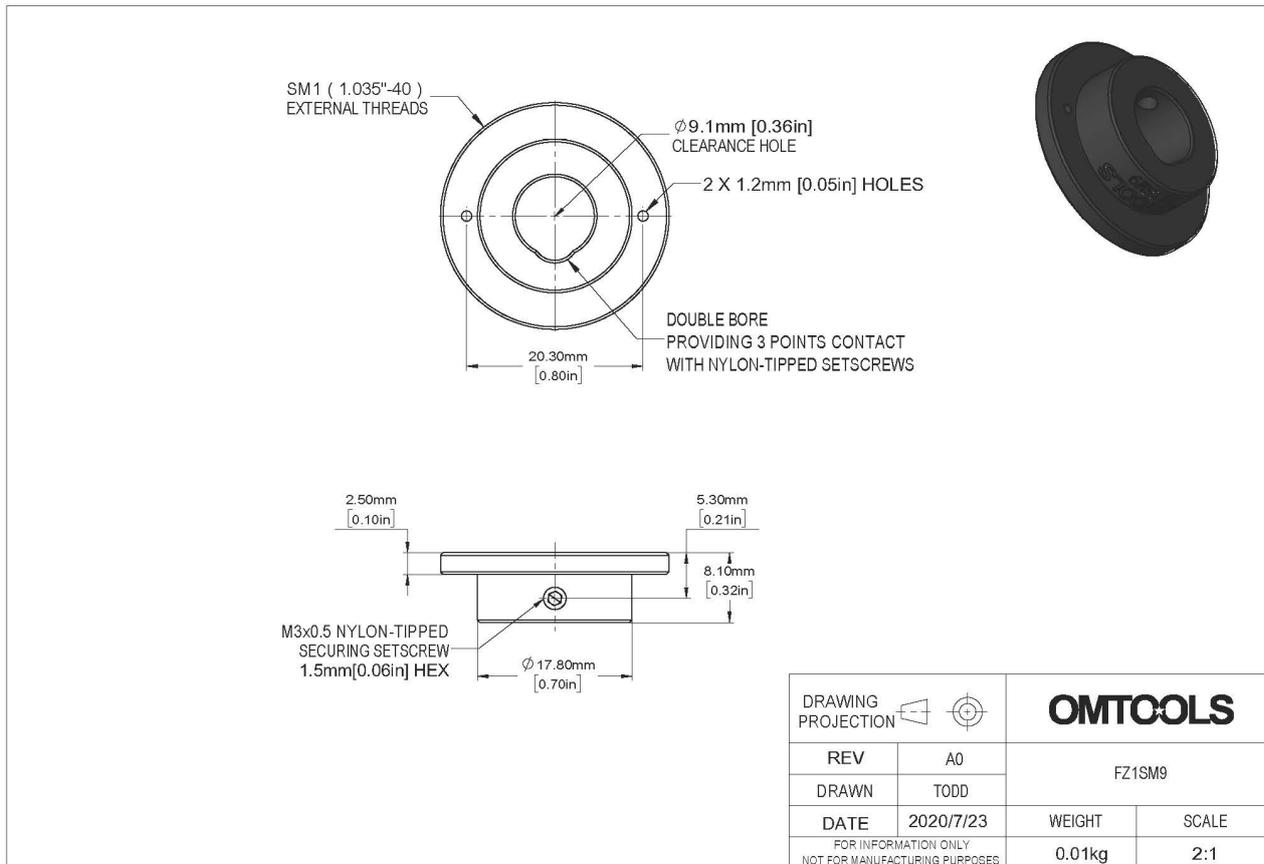


### Чертеж FZ1SM11

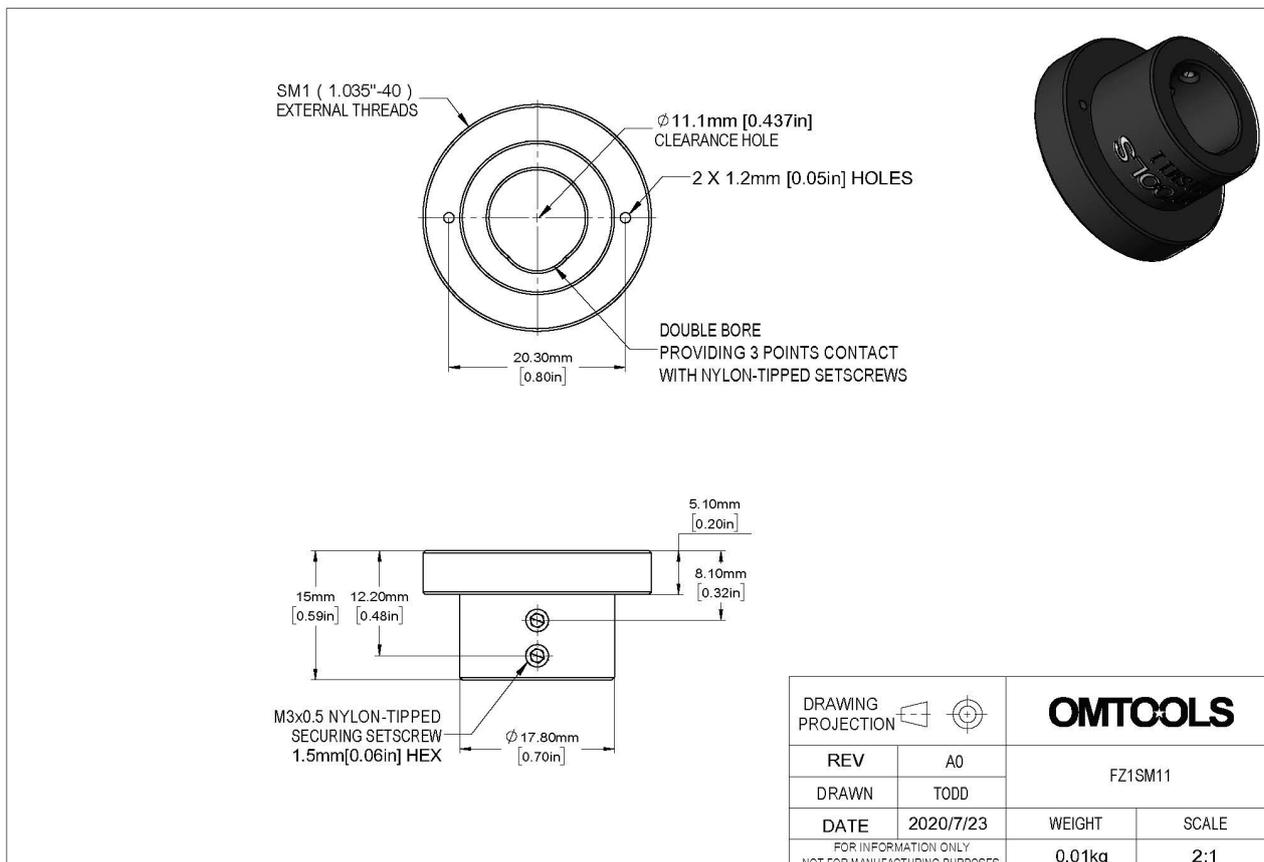

### Чертеж FZ1SM12

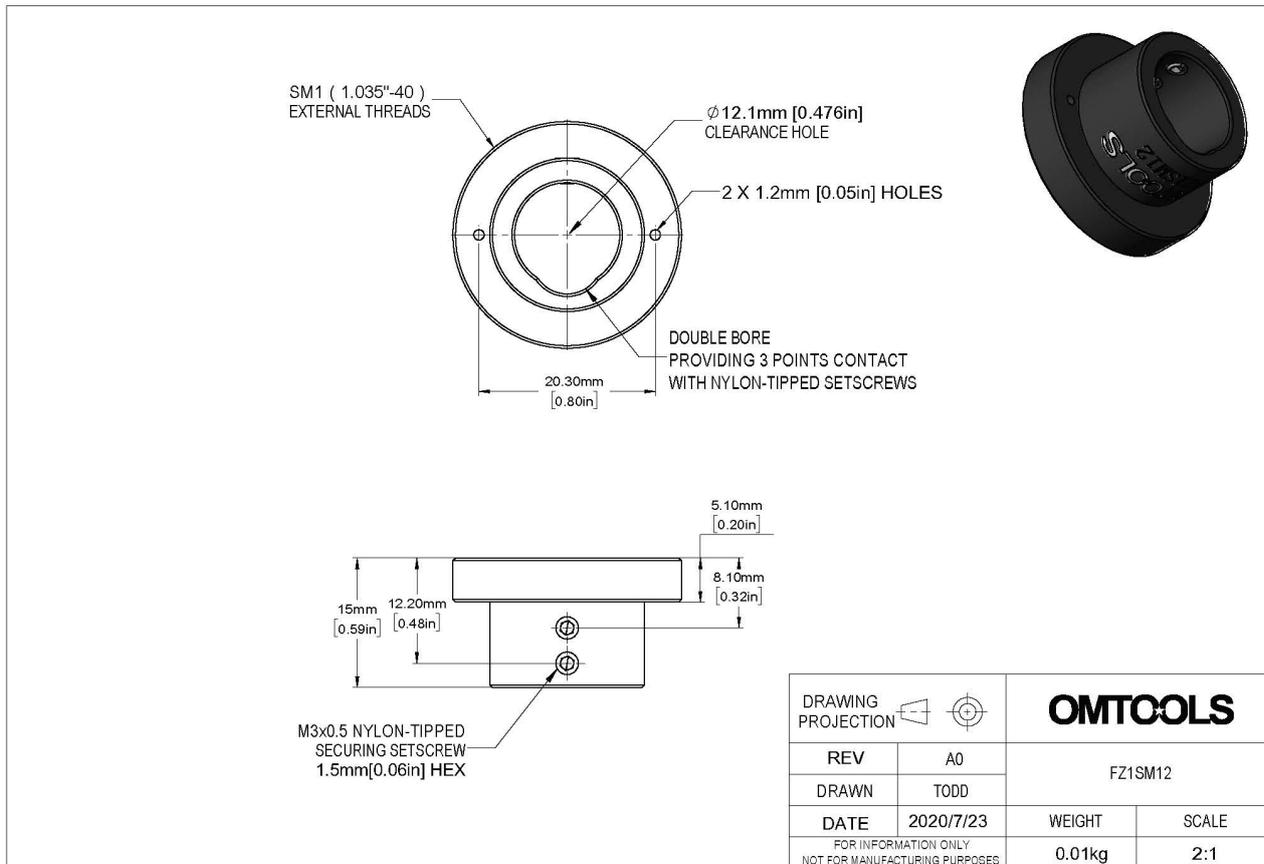

### Чертеж FZ1SM16

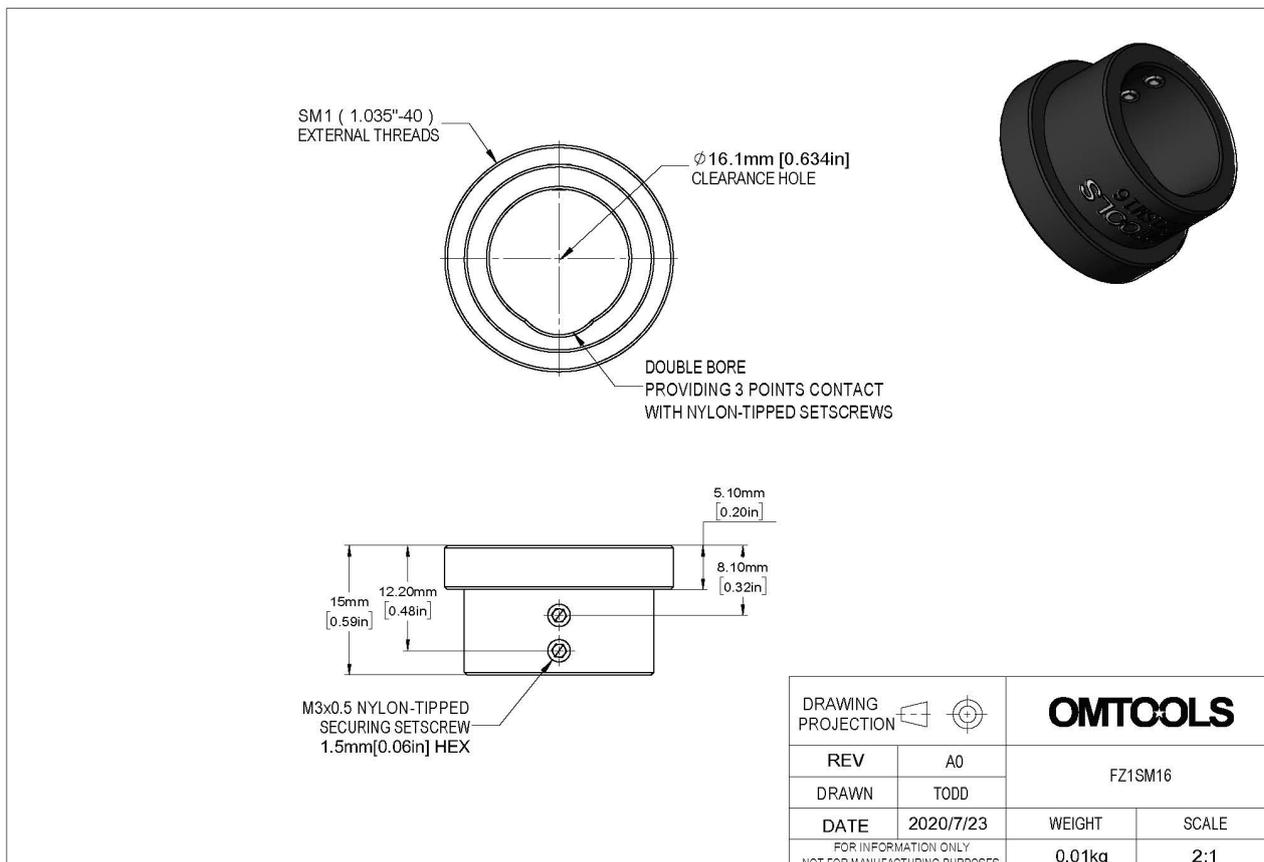

Чертеж FZ1SM18

